


正しいはき方 — コツをつかむと、はきやすくなります —

はじめに ※はき方はストッキング・ソックス共通です。


- たぐらないでください。はきづらくなります。
- 必ず座ってはいってください。
立ちながらはくと、転倒するおそれがあります。
- つま先なしタイプは、着用を補助するフットスリップ付きです。

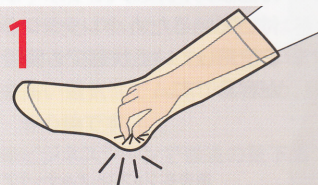

ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分を内側から軽くつまむ。




ストッキングを丸めないように裏返していく。

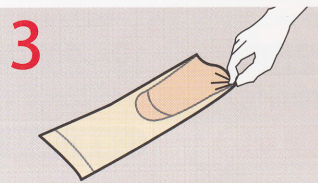


つまんだかかと部分まで裏返す。



● つま先なしタイプのみフットスリップを履く。

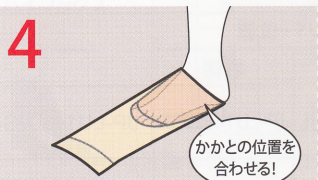

つま先を奥に入れかかとまではく。

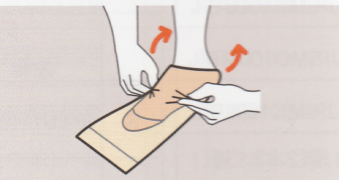

かかとの少し上を持ち、足首まではく。



ねじれ・たるみ・しわに注意しながら、少しずつたくし上げる。



最後に全体をなでて整える。



● つま先なしタイプのみつま先の空いている部分からフットスリップを抜き取る。


TERUMO®

人にやさしい医療へ

JOBST®

Comfort, Health and Style!

弾性ストッキング/ソックス
ジョブスト ウルトラシアー
ジョブスト カジュアルウェア
ジョブスト フォーメン
ジョブスト アルサーケア

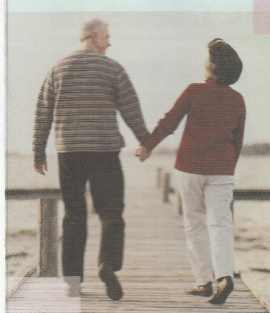

一歩進んだはき心地。



TERUMO®

販売：テルモ株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 <http://www.terumo.co.jp/>

製造販売業者：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

©、TERUMOはテルモ株式会社の登録商標です。

JOBSTはビーエスエヌ メディカル社(ドイツ)の登録商標です。


©テルモ株式会社 2011年12月 11T482-1SS30SZ1112

『ジョブスト』は医療機器です。

医師の指導のもとご使用ください。



「ジョブスト」は、30カ国以
「BSN medical社」のグロ

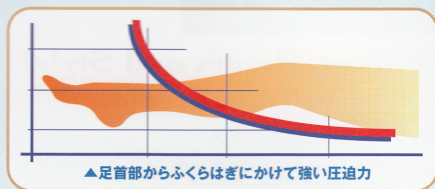

上で実績のあるドイツ医療機器メーカー
ーバルな圧迫ストッキングのブランドです。

『ジョブスト』は、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫力をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫力を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進することができます。

症状や生活スタイルに合わせて、
多彩なラインアップをご用意しています。



充実のラインアップ。

圧迫力の違いに加えて、パンティストッキング、ストッキング、ハイソックスなどのタイプをラインアップ。つま先のあり・なしタイプや女性用・男性用のラインアップで、幅広い年齢層の方々にお選びいただくことができます。

- こだわりのはきやすさとはき心地
 - 破れにくく、丈夫な素材
 - ジョブスト ウルトラシアー20/30
- につつま先なしタイプ登場



ジョブスト カジュアルウェア ジョブスト フォーメン

ジョブストだからできる「重ね履き」。

治療上、高い圧迫力が必要な患者さんや高齢の患者さんで、高い圧迫力の弾力ストッキングは「履きにくい」という方には、薄く通気性の良いジョブストだからできる「重ね履き」をご提案します。




重ね履き着用例


ウルトラシアー20 + カジュアルウェア20

※下に着用しているストッキングにもシワや折り返しがないか、ご確認をお願いいたします。

独自の素材で実現した
美しさが際立つ透明感、ウルトラシアー。

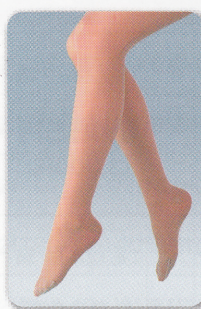

ジョブスト ウルトラシアー

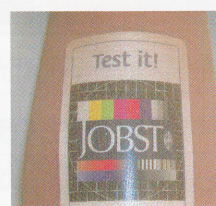

現ウルトラシアー



旧ウルトラシアー



高い通気性で、ムレにくく
素肌のような
フィット感のある履き心地。

お手入れ方法 — 長くお使いいただくために —

- 洗濯は30℃前後のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、静かに押し洗いしてください。
- よくすすいだ後、乾いた厚手のタオルに挟んで水気を切ってから陰干ししてください。
- 色の違うものと一緒に、つけ置きや洗濯をしないでください。

禁止: 素材を傷めますので以下の取り扱いとは避けてください。

塩素系漂白剤 柔軟剤 乾燥機の使用 ドライクリーニング 直射日光 アイロンがけ





ジョブスト ウルトラシアアー 20

履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」

- 伸びの良い素材を使用し、フィット感、ファシイです。
- 履きやすく、通気性も良いため、一日中快適
- すべりをよくして着用を補助するフットス(つま先なしのみ)

販売名:ジョブスト ウルトラシアアー

20



ツシヨン性に配慮して
にお過ごしいただけます。
リップ付です。

医療機器届出番号:13B2X00162000003

ジョブスト カジュアルウェア20

ダイヤパターンを編み込んだ柔らかな「弾性ソックス」

- 消耗の激しい足底部分を補強し、耐久性にすぐれています。
- ご自宅使いやパンツ・シューズスタイルに適しています。




販売名:ジョブスト カジュアルウェア
医療機器届出番号:13B2X00162000008

	カラー サイズ	つま先 あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	シル	つま先 なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先 あり	[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
		シルキーページ	ブラック			シル	キーページ		ブラック	
ハイソックス	S	JP-U20KSS	JP-U20KSB	1足(2本)/箱	JP-	U21KSS	JP-U21KSB	1足(2本)/箱	JP-C20KSB	1足(2本)/箱
	M	JP-U20KMS	JP-U20KMB	3,465円 (3,300円)	JP-	U21KMS	JP-U21KMB	3,675円 (3,500円)	JP-C20KMB	4,200円 (4,000円)
	L	JP-U20KLS	JP-U20KLB		JP-	U21KLS	JP-U21KLB		JP-C20KLB	
ストッキング シリコン グリップ付	S	JP-U20TSS	JP-U20TSB	1足(2本)/箱	JP-	U21TSS	JP-U21TSB	1足(2本)/箱		
	M	JP-U20TMS	JP-U20TMB	4,200円 (4,000円)	JP-	U21TMS	JP-U21TMB	4,410円 (4,200円)		
	L	JP-U20TLS	JP-U20TLB		JP-	U21TLS	JP-U21TLB			
パニティ ストッキング	S	JP-U20WSS	JP-U20WSB	1足/箱						
	M	JP-U20WMS	JP-U20WMB	4,725円 (4,500円)						
	L	JP-U20WLS	JP-U20WLB							
マタニティ	S	JP-U20MSS		1足/箱						
	M	JP-U20MMS		7,875円 (7,500円)						
	L	JP-U20MLS								



■採寸表 (単位:cm)

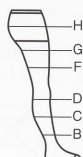

	周径を採寸する	S	M	L
H	腹部(マタニティのみ)	81-132	86-142	91-152
G	ヒップ	71-117	76-127	81-137
F	股下5cm	40-62	46-70	54-78
D	ふくらはぎの最も太い部位	28-38	30-42	32-46
C	足首の最も細い部位	18-21	21-25	25-29
B				

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首の最も細い部位)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・H(ヒップ)ポイントの測定は、ハイソックス、ストッキングをお選びの方は不要です。
- ・G(股下5cm)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。

圧迫力


27~40hPa (20~30mmHg)



ジョブスト ウルトシアー -30

耐久性にすぐれ、
 静脈還流をサポートする「弾性 ストッキング」


- 高い通気性、素肌のようなフィット感のあ
 - 圧迫力はそのままに、はきやすさを向上さ
 - すべりをよくして着用を補助するフットス
- (つま先なしのみ)
- る履き心地です。
 せています。
 リップ付です。

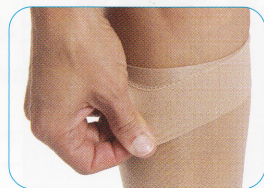

販売名:ジョブスト ウルトシアー 医療機器届出番号:13B2X00162000003

	カラー サイズ	つま先 あり		[包 装単位] 希望 小売価格 (本体価格)	つま先 なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
		シルキーベージュ	ブラック		シルキーベージュ	ブラック	
ハイソックス 	S	JP-U30KSS	JP-U30KSB	1足(2本) / 箱	JP-U31KSS	JP-U31KSB	1足(2本) / 箱
	M	JP-U30KMS	JP-U30KMB	¥4 ,830 (¥4 ,600)	JP-U31KMS	JP-U31KMB	¥4,830 (¥4,600)
	L	JP-U30KLS	JP-U30KLB		JP-U31KLS	JP-U31KLB	
ストッキング シリコン グリップ付 	S	JP-U30TSS	JP-U30TSB	1足(2本) / 箱	JP-U31TSS	JP-U31TSB	1足(2本) / 箱
	M	JP-U30TMS	JP-U30TMB	¥5 ,460 (¥5 ,200)	JP-U31TMS	JP-U31TMB	¥5,460 (¥5,200)
	L	JP-U30TLS	JP-U30TLB		JP-U31TLS	JP-U31TLB	
パンティ ストッキング 	S	JP-U30WSS		1 足 / 箱			
	M	JP-U30WMS		¥5 ,775 (¥5 ,500)			
	L	JP-U30WLS					
マタニティ 	S	JP-U30MSS		1 足 / 箱			
	M	JP-U30MMS		¥8 ,400 (¥8 ,000)			
	L	JP-U30MLS					

■ 採寸表 (単位:cm)

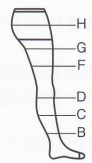

	周径を採寸する	S	M	L
	腹部(マタニティのみ)	81-132	86-142	91-152
H	ヒップ	71-117	76-127	81-137
G	股下5cm	40-62	46-70	54-78
C	ふくらはぎの最も太い部位	28-38	30-42	32-46
B	足首の最も細い部位	18-21	21-25	25-29

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首の最も細い部位)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・H(ヒップ)ポイントの測定は、ハイソックス、ストッキングをお選びの方は不要です。
- ・G(股下5cm)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。

圧迫力

31～43hPa (23～32mmHg)



ジョブストウ

専門使用に適し

- ジョブストウltraシ履き心地を重視した
- 全てつま先なしタイして着用を補助する

販売名:ジョブスト ウltraシアー

ルトラシアーC


た「弾性ストッキング」

アー20・30とは生地が異なり、生地になっています。プとなっているため、すべりをよくフットスリップが附属しています。

医療機器届出番号:13B2X00162000003

		つま先 なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
		カラー サイズ	サンド	
ハイソックス 	S	JP-UC284SS	1足(2本) / 箱 10,500円 (10,000円)	
	M	JP-UC284MS		
	ML	JP-UC284XS		
	L	JP-UC284LS		
ストッキング シリコンなし 	S	JP-UC286SS	1足(2本) / 箱 12,285円 (11,700円)	
	M	JP-UC286MS		
	ML	JP-UC286XS		
	L	JP-UC286LS		
ストッキング シリコン グリップ付 	ショートタイプ	S	JP-UC286SSG	1足(2本) / 箱 12,285円 (11,700円)
		M	JP-UC286MSG	
		ML	JP-UC286XSG	
		L	JP-UC286LSG	
	ロングタイプ	S	JP-UC285SSG	
		M	JP-UC285MSG	
		ML	JP-UC285XSG	
		L	JP-UC285LSG	
パンティ ストッキング 	S	JP-UC290SS	1足 / 箱 21,840円 (20,800円)	
	M	JP-UC290MS		
	ML	JP-UC290XS		
	L	JP-UC290LS		

■採寸表 (単位:cm)

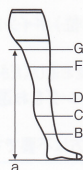

	周径を採寸する	S	M	ML	L
G	股下5cm	44-62	49-67	53-72	56-78
C	ふくらはぎの最も太い部位	30-37	33-40	35-43	37-47
B	足首の最も細い部位	19-22	22-24	24-26	26-29
a-G	踵から股下までの長さ	ショートタイプ... ロングタイプ...		70cmまで	70cm以上

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首の最も細い部位)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・G(股下5cm)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。

ジョブスト フォーメン

リブ編み「ビジネスソックス」、
クール&ドライなメンズタイプ

- 男性の足形やライフスタイルを考慮し、15～40mmHg(20～53hPa)の圧迫力で3タイプをご用意。足先にゆとりがあり、厚手でシックな黒色です。脚のむくみを軽減します。
- つま先はゆったり、かかと部は補強。靴下感覚で着用できるようゴム編み仕様で仕上げています。
 - 高い通気性でムレにくいため、臭いが気にならない快適な履き心地です。
 - ビジネスシーンで普通の靴下感覚でご使用いただけます。



販売名:ジョブスト フォーメン
医療機器届出番号:13B2X00162000004

圧迫力		フォーメン20 20～27hPa (15～20mmHg)	フォーメン30 27～40hPa (20～30mmHg)	フォーメン40 40～53hPa (30～40mmHg)
		つま先 あり		
		カラー サイズ ブラック		
	ハイソックス	S	JP-MA100SB	JP-MB100SB
		M	JP-MA100MB	JP-MB100MB
		L	JP-MA100LB	JP-MB100LB
			JP-MC100SB	JP-MC100MB
[包装単位]		1足(2本)／箱	1足(2本)／箱	1足(2本)／箱
希望小売価格 (本体価格)		3,937円 (3,750円)	5,670円 (5,400円)	7,245円 (6,900円)
	ストッキング シリコン グリップ付	S	JP-MB200SB	JP-MC200SB
		M	JP-MB200MB	JP-MC200MB
		L	JP-MB200LB	JP-MC200LB
			JP-MC200SB	JP-MC200MB
[包装単位]		1足(2本)／箱	1足(2本)／箱	1足(2本)／箱
希望小売価格 (本体価格)		9,975円 (9,500円)	10,395円 (9,900円)	10,395円 (9,900円)

ジョブスト アルサーケア

下腿に創傷処置が必要な
静脈還流障害など




高い圧迫力を得ることと、履きやすさを追求した、重ね履きが可能なタイプです。ジッパーが付いているため、ドレッシングを使用している状態でも装着が容易です。

販売名:ジョブスト アルサーケア
医療機器届出番号:
13B1X10103000015

ジッパー付ストッキング		弾性ライナー	
21～32hPa (16～24mmHg)		19～29hPa (14～22mmHg)	
つま先 なし		つま先 あり	
サイズ	ジッパー付ストッキング+ 弾性ライナー		弾性ライナー
	ジッパー位置		—
	左側	右側	
	S	JP-LU14485SL	JP-LU14520SR
M	JP-LU14486ML	JP-LU14521MR	JP-LU14500S
L	JP-LU14487LL	JP-LU14522LR	JP-LU14501M
XL	JP-LU14488YL	JP-LU14523YR	JP-LU14502L
ジッパー付ストッキング1本+ 弾性ライナー2本／箱		弾性ライナーのみ 3本／箱	
8,925円 (8,500円)		5,670円 (5,400円)	

■ 採寸表 (単位:cm)

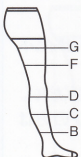

周径を採寸する		ジョブスト フォーメン			ジョブスト アルサーケア			
		S	M	L	S	M	L	XL
G	股下5cm	40～62	46～70	54～78				
C	ふくらはぎの最も太い部位	28～38	30～42	32～46	29～35	34～41	40～47	46～54
B	足首の最も細い部位	18～21	21～25	25～29	18～21	21～24	24～27	27～30

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首の最も細い部位)ポイントを優先させていただきます。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・G(股下5cm)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。

お客様各位



人にやさしい医療へ

ジョブスト ウルトラシアー

新商品「20・30 ストッキングタイプつま先なし」及び、 品種追加のご案内

2011 年 7 月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弾性ストッキング「ジョブスト ウルトラシアー20・30」につきまして、
下記の通り、新商品及び、品種追加をご案内申し上げます。

尚、詳細につきまして弊社担当者より別途ご連絡申し上げます。

敬白

記

新発売

■ ジョブスト ウルトラシアー20・30 ストッキングタイプ つま先なし



〔製品概要〕

- ① ジョブスト ウルトラシアー20
圧迫力：20 - 27hPa (15~20mmHg)
タイプ：ストッキング つま先なし
カラー：シルキーベージュ、ブラック
- ② ジョブスト ウルトラシアー30
圧迫力：27 - 40hPa (20~30mmHg)
タイプ：ストッキング つま先なし
カラー：シルキーベージュ、ブラック



- ◆ ストッキングタイプで、足首から大腿までの段階的な圧勾配。
- ◆ シリコングリップがドットタイプのため、皮膚に優しくフィットします。
- ◆ つま先がないため、通気性が良く、快適な履き心地。
- ◆ 静脈還流障害、血管の浮きなどに。
- ◆ すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付。

ドットシリコン



品種追加

以下品種のカラーにブラックが追加されます。

- ジョブスト ウルトラシアー30 ハイソックスタイプ つま先あり
- ジョブスト ウルトラシアー30 ストッキングタイプ つま先あり
- ジョブスト ウルトラシアー20 ストッキングタイプ つま先あり

■販売開始時期

2011 年 7 月下旬

お客様各位

ジョブスト ウルトラシア-20、30 ハイソックスタイプつま先なし 新製品のご案内

2010年3月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弾性ストッキング「ジョブスト ウルトラシア-20」、「ジョブスト ウルトラシア-30」につきまして、下記の通り、新製品を発売させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

尚、詳細につきまして弊社担当者より別途ご連絡申し上げます。

敬白

記

■ ジョブスト ウルトラシア-20、ジョブスト ウルトラシア-30 ハイソックスタイプ つま先なし

- 静脈還流障害、血管の浮きなどに。
- つま先がないため、通気性が良く、快適な履き心地。
- 透明度が高く、ファッショナブル。
- すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付。

【製品概要】

・ジョブスト ウルトラシア-20


圧迫力：20～27hPa (15～20mmHg)
タイプ：ハイソックス つま先なし（フットスリップ付）
カラー：シルキーベージュ、ブラック

・ジョブスト ウルトラシア-30

圧迫力：27～40hPa (20～30mmHg)
タイプ：ハイソックス つま先なし（フットスリップ付）
カラー：シルキーベージュ、ブラック

【サイズ表】 適正な圧迫を得るために必ず正しいサイズの製品をお使い下さい。

	S	M	L
ふくらはぎの最も太い部分	28～38cm	30～42cm	32～46cm
足首の最も細い部分	18～21cm	21～25cm	25～29cm

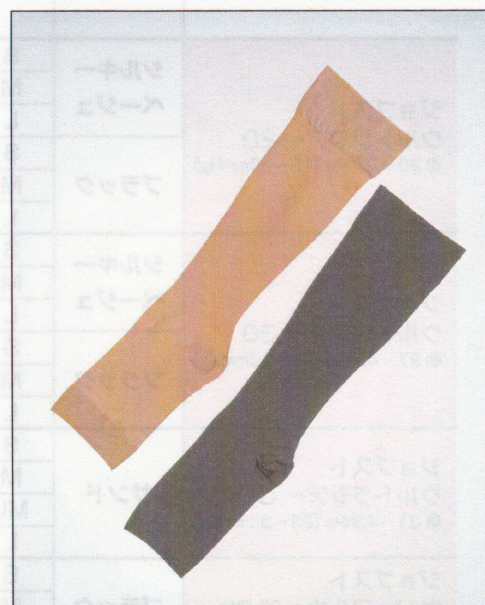

■ 発売開始時期 ジョブスト ウルトラシア-20 2010年3月下旬
ジョブスト ウルトラシア-30 2010年6月頃