

平編み弾性ストッキング 「エアボ・ウェーブ」




三優メディカル
Three Gentness Medical

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、
後藤学園附属リンパ浮腫研究所との共同開発

特許取得済み

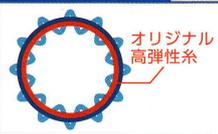

オリジナル
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時は
のびやすく穿きやすい設計でありながら、
装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

エアボ・ウェーブ ³ 特許取得済み つのやさしさ

どなたでも簡単に穿けて、
浮腫を軽減できる
補助用ストッキングです。
足背部、内果、外果の
浮腫ケアにもお使いいた
だけます。

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ
(シームレス)の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の
無縫製編立設計
- 3 ずれやすいかかと部分は三次元曲線構造設計
でしっかりフィット

リンパ浮腫患者さまの
「部屋着」として、
日中家事をしながら…
就寝用としても
お使いいただけます。

様々な圧迫用品と
組み合わせて
使うことが
できます。


圧迫力：
20~25mmHg



エアボ・ウェーブ ストッキング



エアボ・ウェーブ ハイソックス

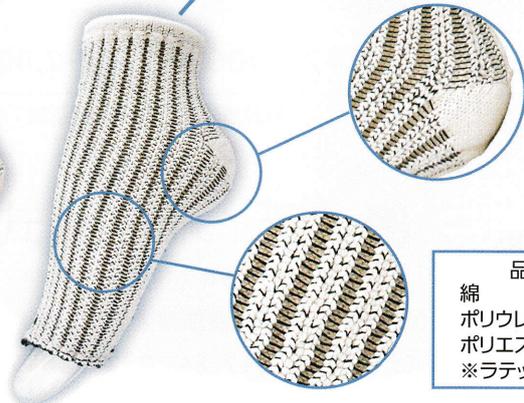

エアボ・ウェーブ アンクル

品質表示

綿	82%
ポリウレタン	10%
ポリエステル	8%
※ラテックスフリー	

エアボ・ウェーブ アンクル(足部用)


つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

5号	グリーン	
6号	レッド	

サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フート丈	A~B	B(足首周径)
5号	AW5000ankle	3,800円	20~24 cm	12 cm	18~22 cm
6号	AW6000ankle	3,800円	22~25 cm	13 cm	22~26 cm

※7号は受注生産にて承ります。

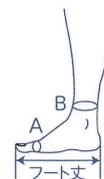

エアボ・ウェーブ ハイソックス(下肢用)




つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

4号	オレンジ	
5号	グリーン	
6号	レッド	
7号	ブラック	
8号	パープル	

サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フート丈	B(足首周径)	C(ふくらはぎ周径)
※ 4号	ショート丈	AW4000S-Hi	20~24 cm	17~21 cm	27~31 cm
	ロング丈	AW4000L-Hi			
5号	ショート丈	AW5000S-Hi	20~24 cm	18~22 cm	30~35 cm
	ロング丈	AW5000L-Hi			
6号	ショート丈	AW6000S-Hi	22~25 cm	22~26 cm	34~39 cm
	ロング丈	AW6000L-Hi			
7号	ショート丈	AW7000S-Hi	22~25 cm	22~26 cm	38~44 cm
	ロング丈	AW7000L-Hi			
※ 8号	ショート丈	AW8000S-Hi	22~25 cm	24~28 cm	43~48 cm
	ロング丈	AW8000L-Hi			

※ロング丈のみ、上下に色がついています

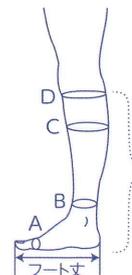

※丈の定義

※4号~8号共通


<A~D(踵から腓骨頭)>

■ショート丈
32~38 cm

■ロング丈
38~44 cm

※4号と8号は受注生産にて承りますので、納期は発注から最短2週間程度いただきます。

エアボ・ウェーブ ストッキング(下肢用)

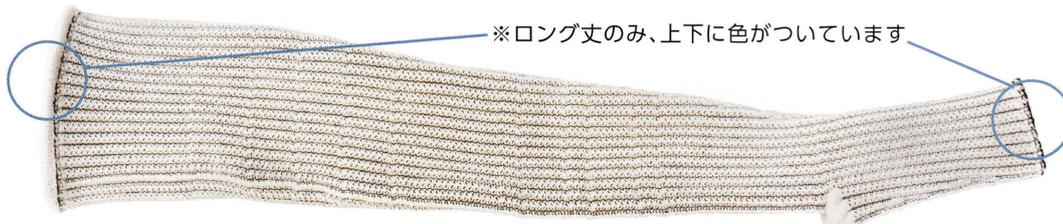

※ロング丈のみ、上下に色がついています

つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

4号	オレンジ	
5号	グリーン	
6号	レッド	
7号	ブラック	
8号	パープル	

サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フート丈	B(足首周径)	C(ふくらはぎ周径)	G(大腿部周径)
4号	ショート丈	AW4000S	20~24 cm	17~21 cm	27~31 cm	40~45 cm
	ロング丈	AW4000L				
5号	ショート丈	AW5000S	20~24 cm	18~22 cm	30~35 cm	44~50 cm
	ロング丈	AW5000L				
6号	ショート丈	AW6000S	22~25 cm	22~26 cm	34~39 cm	49~56 cm
	ロング丈	AW6000L				
7号	ショート丈	AW7000S	22~25 cm	22~26 cm	38~44 cm	55~63 cm
	ロング丈	AW7000L				
8号	ショート丈	AW8000S	22~25 cm	24~28 cm	43~48 cm	62~70 cm
	ロング丈	AW8000L				



※丈の定義

※4号~8号共通

<A~G(股下)>

■ショート丈
62~68 cm

■ロング丈
68~74 cm

*セット割価格 1双(2枚)¥22,000 通常より¥2,000値引き (※セット割はストッキングのみ、アンクル・ハイソックスは対象外です。)

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社


www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店

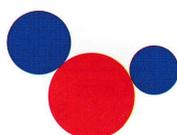

三優メディカル
株式会社



より効果を感じていただくために、必ずご確認ください。

平編み弾性ストッキング「エアボ・ウェーブ」 下肢用

ご使用のしおり




装着する前に
行ってください

①




中面(肌に触れる面)がくるぶしの部分まで外にくるよう内側から折り返します。

②

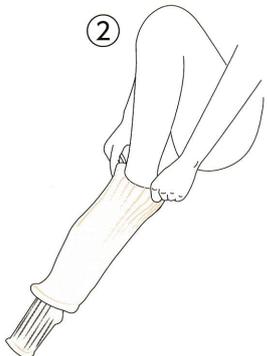

折り返したところからゆっくりと足先を通していきます。

③

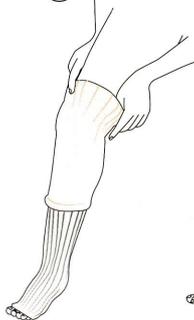

内側にしっかりと親指を入れて持ち、膝上まで引き上げます。

④



かかとの位置を合わせます。

⑤



折り返した部分をゆっくり上げていきます。

⑥



足のつけ根まで上げ、ねじれやたるみを整えます。

■エアボウエーブストッキング装着方法

■装着時の注意点

1

外面の繊維は爪が引っ掛かると、ほつれの原因となります場合がありますのでご注意ください。


2

装着後は折り返さずにご使用ください。

3

かかとを引っぱり上げず少し下げてください。

かかとを少し下げることでズリ落ちを防止します

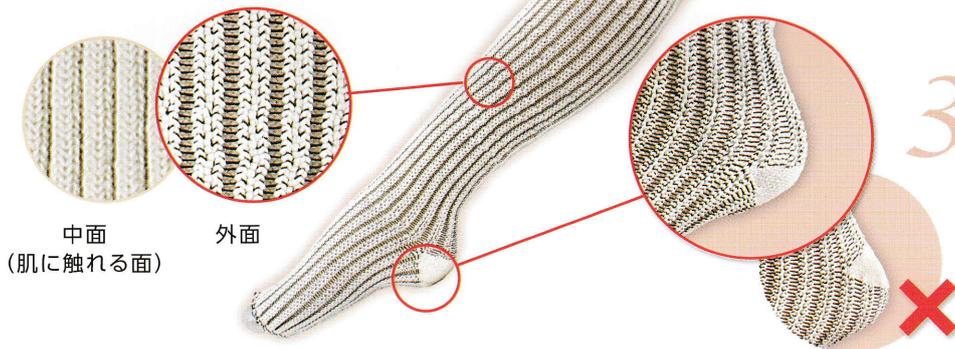

中面 (肌に触れる面)

外面


■洗濯方法

普段どおりそのまま洗濯機へ
天日干し・乾燥機もOK

ネット不要

柔軟剤・漂白剤の使用もOK

干し方 ▶ 中面を裏返し、平干してください
※洗濯ばさみは使用しないでください

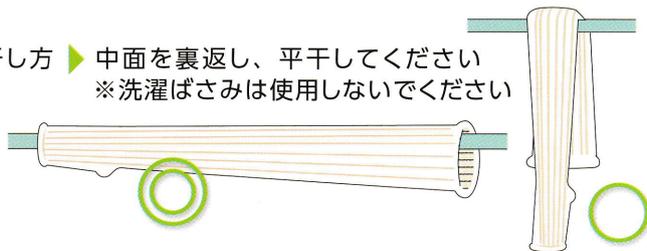

- ・変質するおそれがありますので、アイロンは使用しないでください。
- ・爪が気になる場合はゴム手袋を使って装着されることを推奨いたします。
- ・保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。

品質表示
綿 82%
ポリウレタン 10%
ポリエステル 8%
※ラテックスフリー

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。



製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com